


B▶WISE

WOUND CARE ALLIANCE

- Visokopojna obloga
- Visokopojna obloga Extra / Extra Silicone
- Visokovpojna obloga z aktivnim ogljem
- Tehnologija gelirajočih vlaken
- Pena s silikonom
- Silikonska mrežica
- Lipotul lipokoloidna mrežica



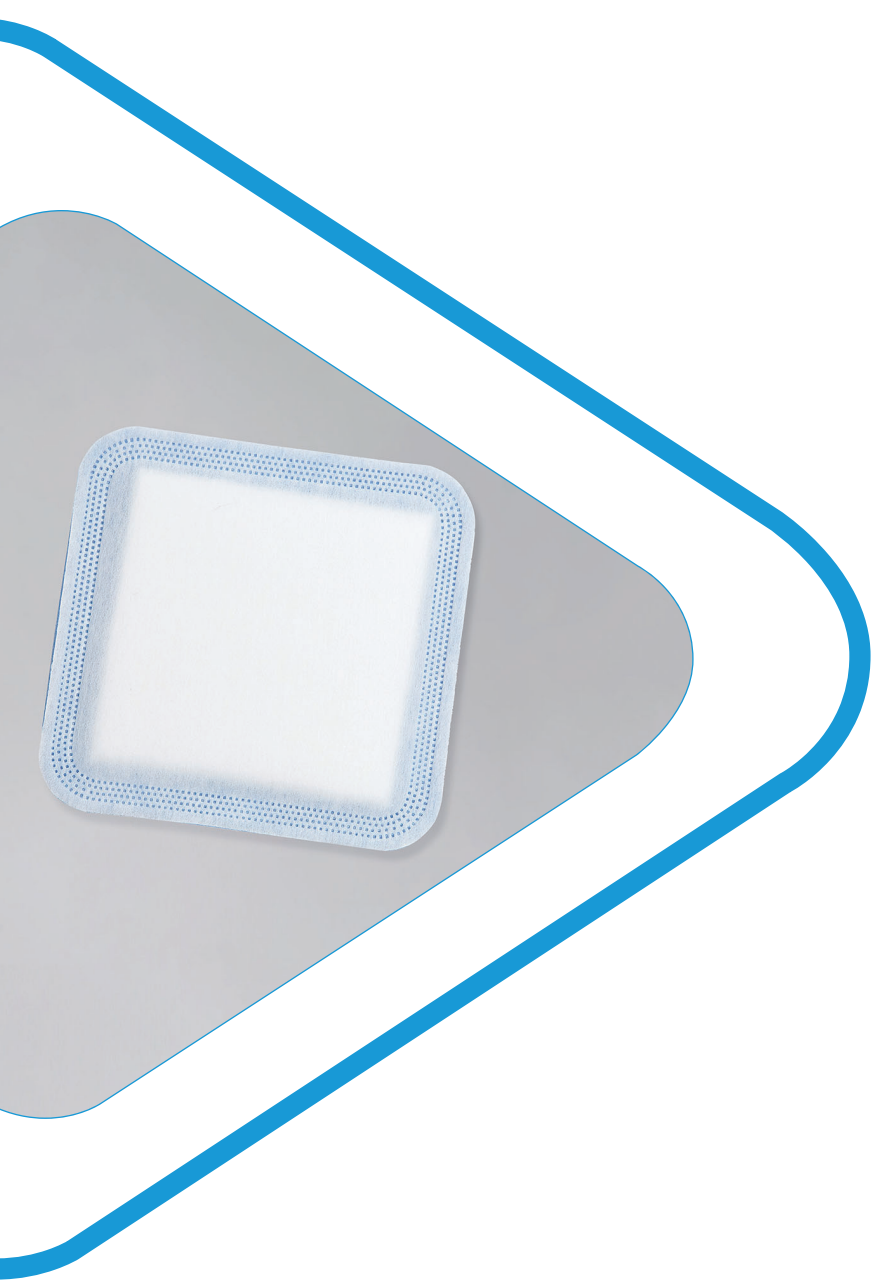

B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE


| VISOKOVPOJNA
OBLOGA





Visokovpojna obloga

Odlična sposobnost vpijanja in zadrževanja izločka – tudi pod pritiskom.

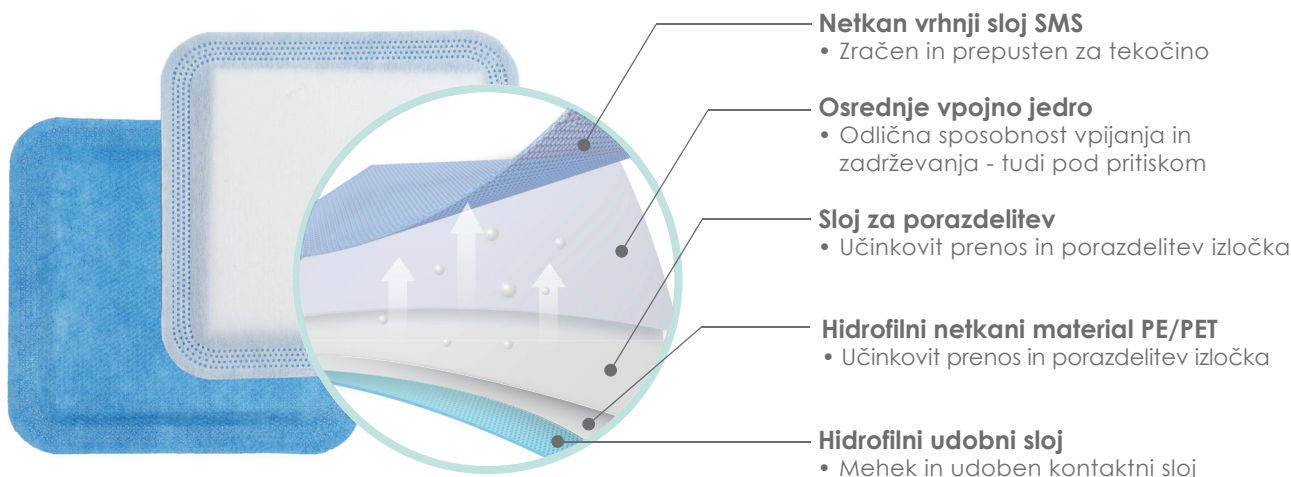

Izjemno udobna obloga, primerna za uporabo ob zelo veliki količini izločka, ki ga vpije in zadrži v visokovpojnem jedru – tudi pod pritiskom. MMP in bakterije se zadržijo v visokovpojnem jedru, kar dodatno prispeva k učinkovitemu celjenju rane. V nasprotju z mnogimi visokovpojnimi oblogami se zaradi jedra iz mešanice SAP in naravnih vlaken dobro obnese pri viskoznem izločku. Obloga ohrani obliko in tako zagotovi delovanje.

INDIKACIJE

Videz rane:



Količina izločka:



Srednje - Zelo veliko

Indikacije

- Diabetične razjede
- Razjede na nogah (venske in arterijske)
- Poškodbe / razjede zaradi pritiska
- Opekline 1. in 2. stopnje
- Akutne rane

KODE PROIZVODA

Vrsta: Brez roba

Ref. koda	Velikost (cm)	Kos / Pak.
SA100100	10 X 10	10
SA100200	10 X 20	10
SA150150	15 X 15	10
SA200200	20 X 20	10

B-Wise partner:



Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
1000 Ljubljana

T: 01 542 51 11


E: info@zaloker-zaloker.si

W: zaloker-zaloker.si | rane.si

Be Wise!



bwisewoundcare.com

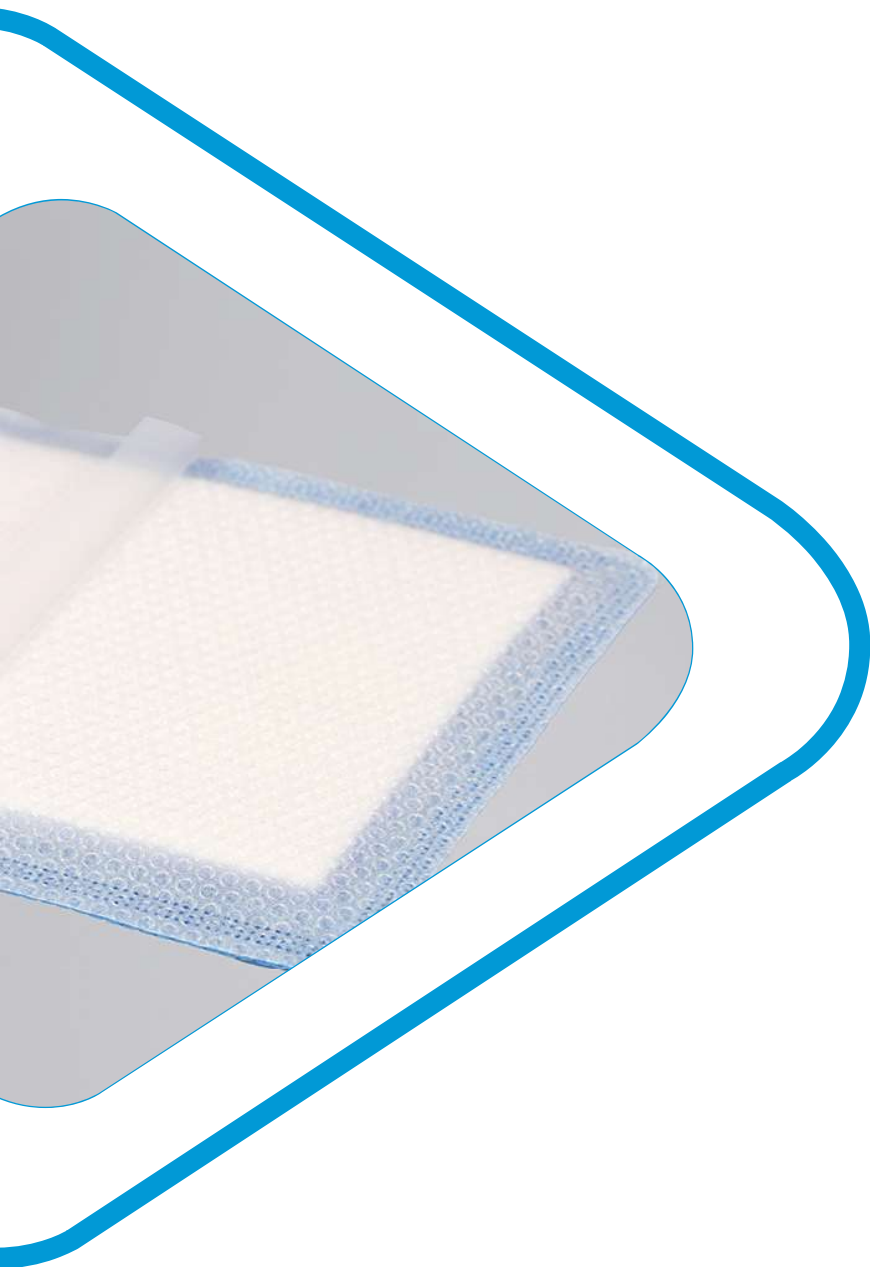


B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

VISOKOVPOJNA
OBLOGA EXTRA /
EXTRA SILICONE



VISOKOVPOJNA OBLOGA EXTRA / EXTRA SILICONE

Odlična sposobnost vpijanja in zadrževanja
izločka – tudi pod pritiskom.

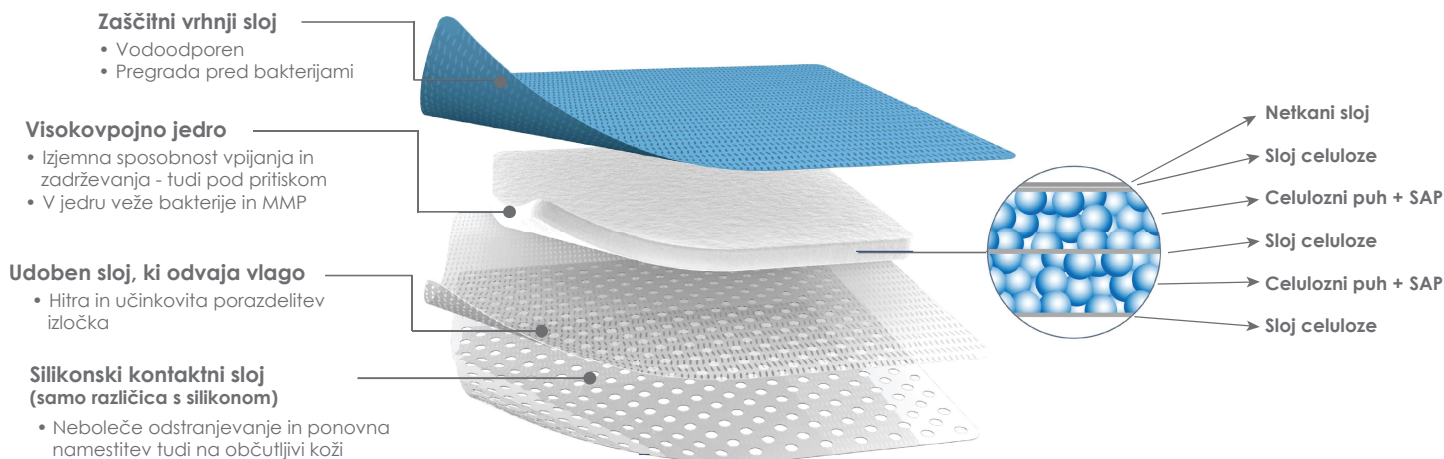

Obloga, zasnovana za zelo veliko količino izločka, ki se absorbira in zadrži v visokovpojnem jedru – tudi pod pritiskom. MMP in bakterije se zadržijo v visokovpojnem jedru, kar dodatno prispeva k učinkovitemu celjenju rane.

Odlično obvladovanje (tudi) visoko viskoznega izločka zaradi jedra iz mešanice SAP in naravnih vlaken ter silikonske plasti (samo silikonska različica) z večjo propustnostjo kot običajno. Vpojno jedro ohrani obliko in tako zagotovi delovanje.

INDIKACIJE

Videz rane:



Količina izločka

Extra:

Srednje – Zelo veliko



Količina izločka

Extra Silicone:

Malo – Zelo veliko



Indikacije:

- Diabetične razjede na stopalu
- Razjede na nogah (venske in arterijske)
- Razjede zaradi pritiska
- Opekline 1. in 2. stopnje
- Odprte kirurške rane

KODE PROIZVODA

Extra brez roba

Ref. koda	Velikost (cm)	Kos / Pak.
SAX100100	10 X 10	10
SAX100200	10 X 20	10
SAX150150	15 X 15	10
SAX200200	20 X 20	10

Extra Silicone brez roba

Ref. koda	Velikost (cm)	Kos / Pak.
SSAX100100	10 X 10	10
SSAX100200	10 X 20	10
SSAX150150	15 X 15	10
SSAX200200	20 X 20	10

B-Wise partner:




Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova 9, Ljubljana
T: 01 542 51 11
E: info@zaloker-zaloker.si
W: zaloker-zaloker.si | rane.

Be Wise!



bwisewoundcare.com

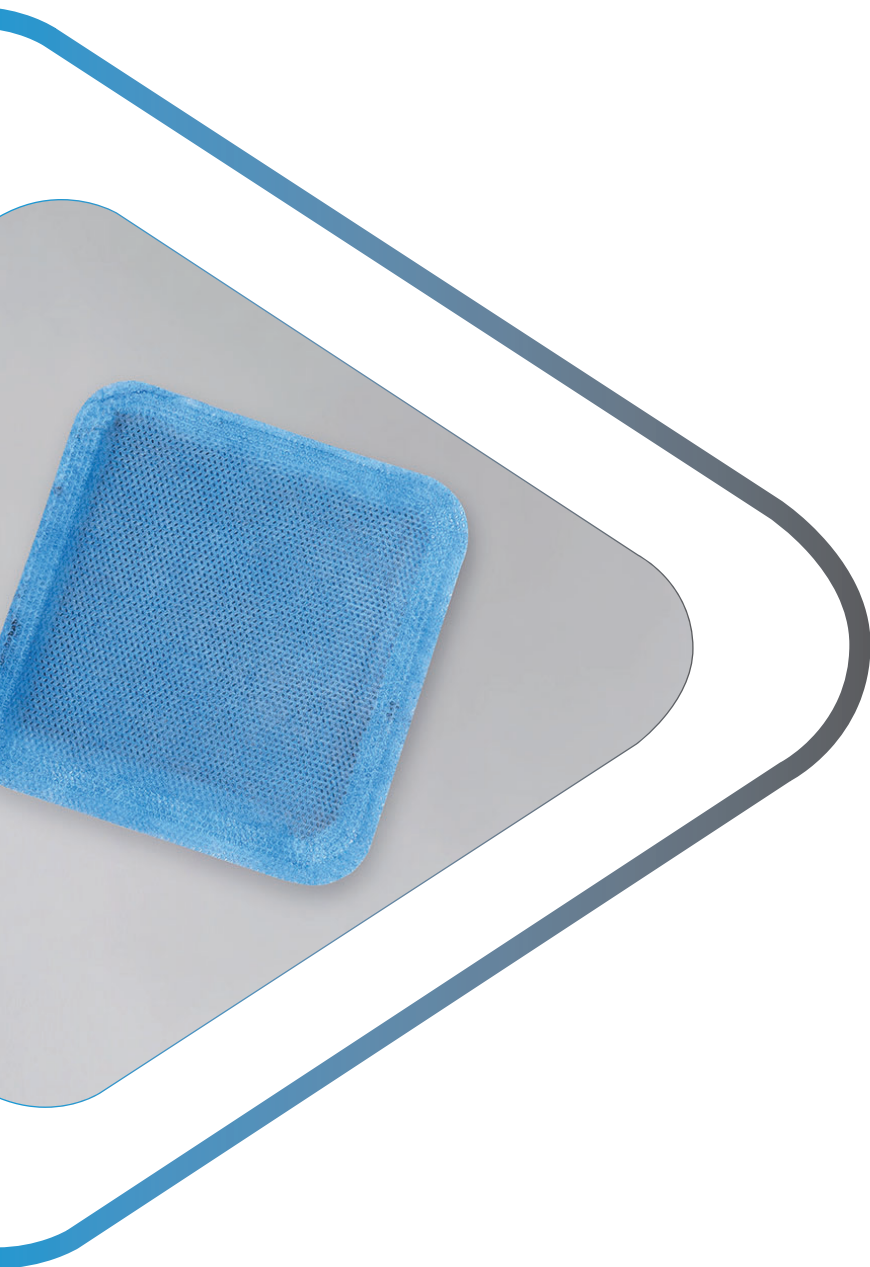


B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

VISOKOVPOJNA
OBLOGA Z
AKTIVNIM
OGLJEM



Visokovpojna obloga z aktivnim ogljem

Učinkovito zmanjšanje neprijetnega vonja rane.
Odličen nadzor nad izločkom.

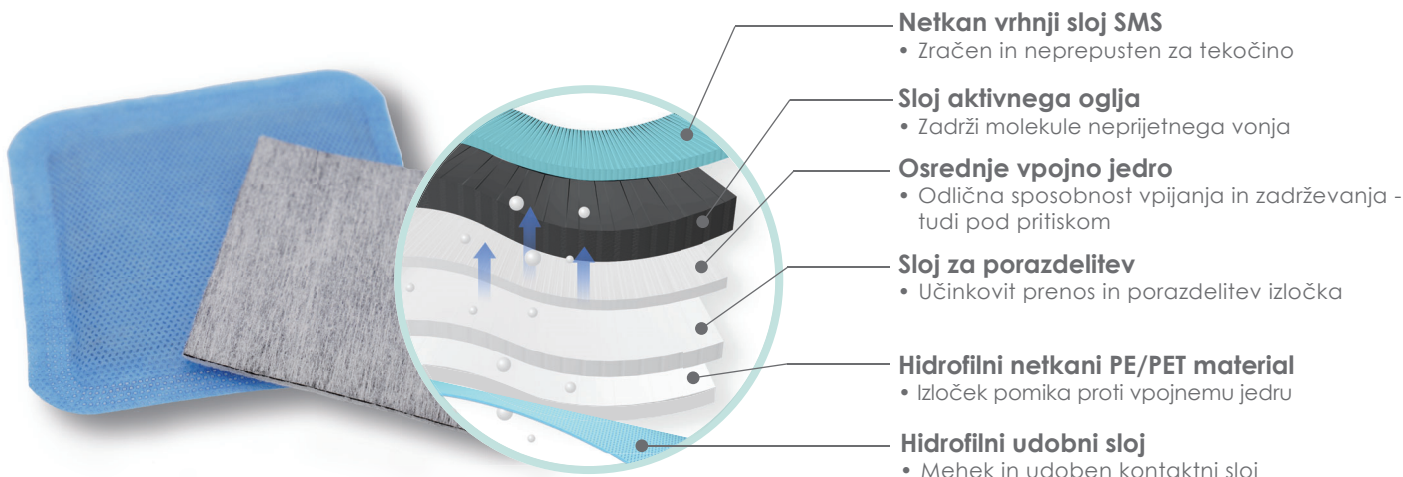

Rane z neprijetnim vonjem negativno vplivajo na življenje pacientov, zato mora biti zmanjšanje neprijetnega vonja prednostna naloga zdravstvenega osebja.

Sloj aktivnega oglja v visokovpojni oblogi B-WISE učinkovito zmanjša neprijeten vonj rane. Visokovpojno jedro nase veže tudi MMP in bakterije, kar dodatno prispeva k učinkovitemu celjenju rane.

INDIKACIJE

Videz rane:



Količina izločka:

Srednje – Zelo veliko



Indikacije:

- Rane z neprijetnim vonjem, s srednje do veliko izločka
- Diabetične razjede na stopalu
- Razjede na nogah (venske in arterijske)
- Razjede zaradi pritiska
- Opekline 1. in 2. stopnje
- Akutne rane

KODE PROIZVODA

Brez roba:

Ref. koda	Velikost cm	Kos / Pak.
SAC100100	10 X 10	10
SAC100200	10 X 20	10
SAC150150	15 X 15	10

B-Wise partner:



Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
1000 Ljubljana

T: 01 542 51 11


E: info@zaloker-zaloker.si

W: zaloker-zaloker.si | rane.si

Be Wise!



bwisewoundcare.com

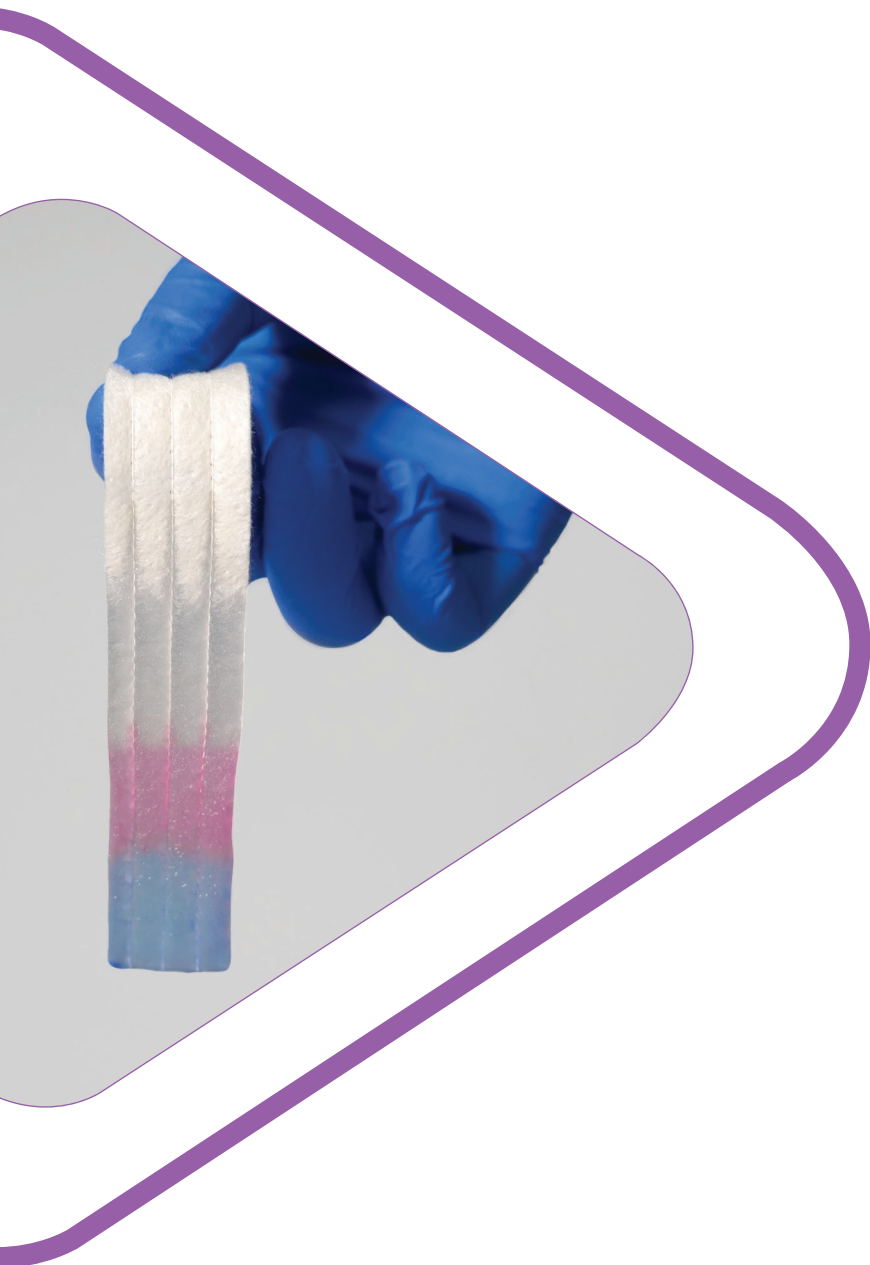

B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE


OBLOGA S
TEHNOLOGIJO
GELIRAJOČIH
VLAKEN



OBLOGA S TEHNOLOGIJO GELIRAJOČIH VLAKEN

Zelo dobra vpojnost in zadrževanje izločka, preprečevanje bakterijske kontaminacije. Ojačana za enostavno odstranitev.

Obloga hitro nabrekne, pri čemer nastane polprosojni gel, ki preprečuje iztekanje in maceracijo, hkrati pa ohranja želeno optimalno vlažno okolje za celjenje ran.

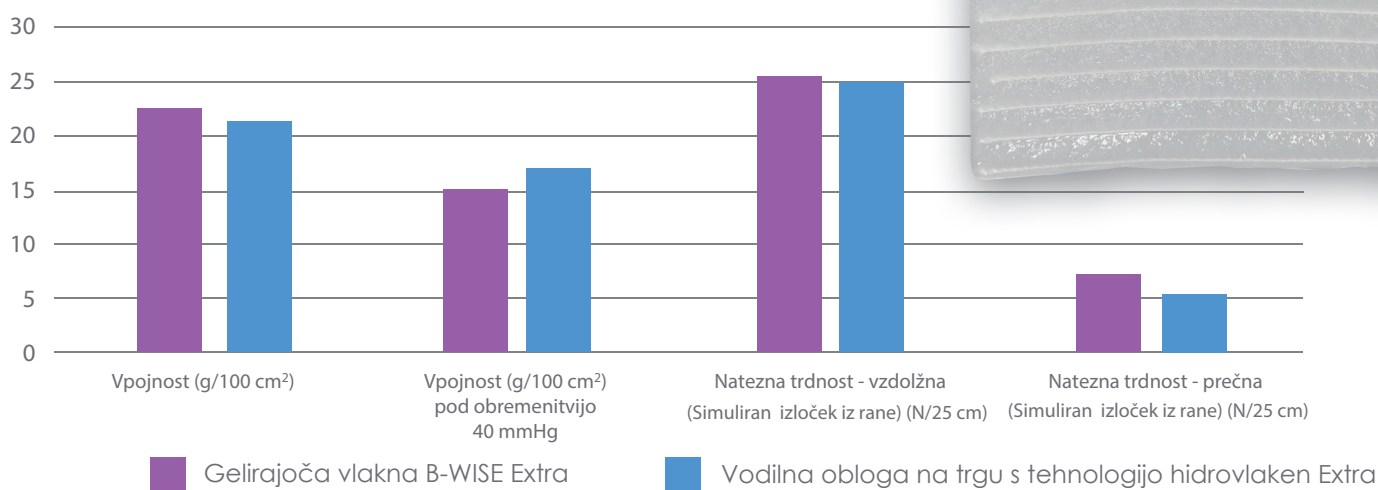

INDIKACIJE

Videz rane:



Količina izločka:
Malo - Srednje



Indikacije:

- Razjede zaradi pritiska
- Kirurške rane
- Diabetične razjede
- Razjede (npr. venozne, razjede mešanih etiologij)
- Raztrganine kože
- Površinske in delno globoke opekline
- Odvzemna mesta

KODA PROIZVODA

Ref. koda	Velikost (cm)	Kos/Pak.
GFR020450	2x45	10
GFR050050	5x5	10
GFR100100	10x10	10
GFR150150	15x15	10

B-Wise partner:



Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
1000 Ljubljana

T: 01 542 51 11


E: info@zaloker-zaloker.si

W: zaloker-zaloker.si | rane.si

Be Wise!



bwisewoundcare.com

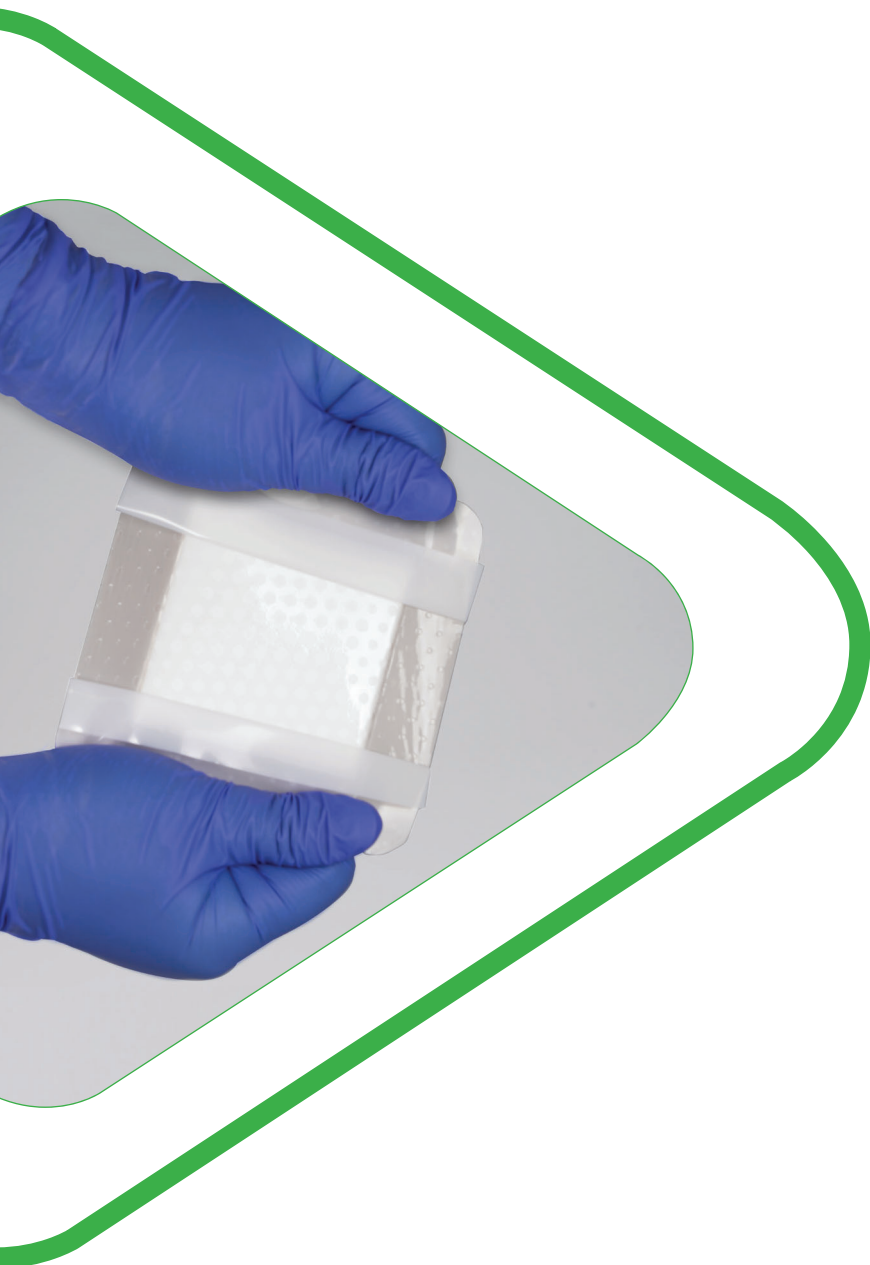

B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

PENA S
SILIKONOM



PENA S SILIKONOM

Odlična obloga za obvladovanje izločka, ki nežno neguje krhko in občutljivo kožo.

Z ROBOM

Zaščitni vrhni sloj

- Visok MVTR (prehod vodne pare)
- Gladek in prožen
- Vodoodporna in bakterijska pregrada

Visokovpojno jedro

- Izjemna vpojnost
- Zmanjša tveganje za nastanek maceracije

Netkani sloj

- Razporedi izloček po veliki površini
- Povečana vpojna zmogljivost

Vpojna PU pena

- Odlična zmogljivost obvladovanja količine izločka
- Dodatno udobje in mehka zaščita

Silikonski kontaktni sloj

- Premaz s silikonskim gelom in tehnologijo prepustne strukture
- Nežno neguje krhko in občutljivo kožo
- Prepustnost omogoča učinkovito vpojnost zelo viskoznega izločka
- Vodoodporna in bakterijska pregrada

BREZ ROBA

Silikonski kontaktni sloj

- Premaz s silikonskim gelom in tehnologijo prepustne strukture
- Nežna in zanesljiva pričvrstitev
- Hitra in enakomerna porazdelitev izločka
- Brez odstranjevanja epidermalnih celic
- Neboleča odstranitev in minimalna poškodba povrhnjice kože

Vpojna PU pena

- Odlično zadrževanje tekočin
- Omogoča dodatno udobje in mehko zaščito

Zaščitni spodnji sloj

- Vodoodporna in bakterijska pregrada
- Mehek in prožen

INDIKACIJE

Videz rane:



Količina izločka:

Malo - Veliko



Indikacije:

- Razjede zaradi pritiska
- Kirurške rane
- Diabetične razjede
- Površinske in delno globoke opekline
- Raztrganine kože
- Razjede na nogah (npr. venske, razjede mešane etiologije)
- Odvzemna mesta za presadek

KODE PROIZVODA

Vrsta obloge	Ref. koda	Velikost (cm)	Kos/ Pak.
Brez roba	SF075075	7.5 x 7.5	10
	SF100100	10 x 10	10
	SF150150	15 x 15	10
	SF200200	20 x 20	10
Z robom	SFB100100	10 x 10 (6.2 x 6.2)	10
	SFB150150	15 x 15 (10.5 x 10.5)	10
	SFB200200	20 x 20 (15 x 15)	10
	SFB230230S	23 x 23 (16.5 x 17) Sakralni predel	10

B-Wise partner:




Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova 9, Ljubljana
T: 01 542 51 11
E: info@zaloker-zaloker.si
W: zaloker-zaloker.si | rane.si

Be Wise!



bwisewoundcare.com

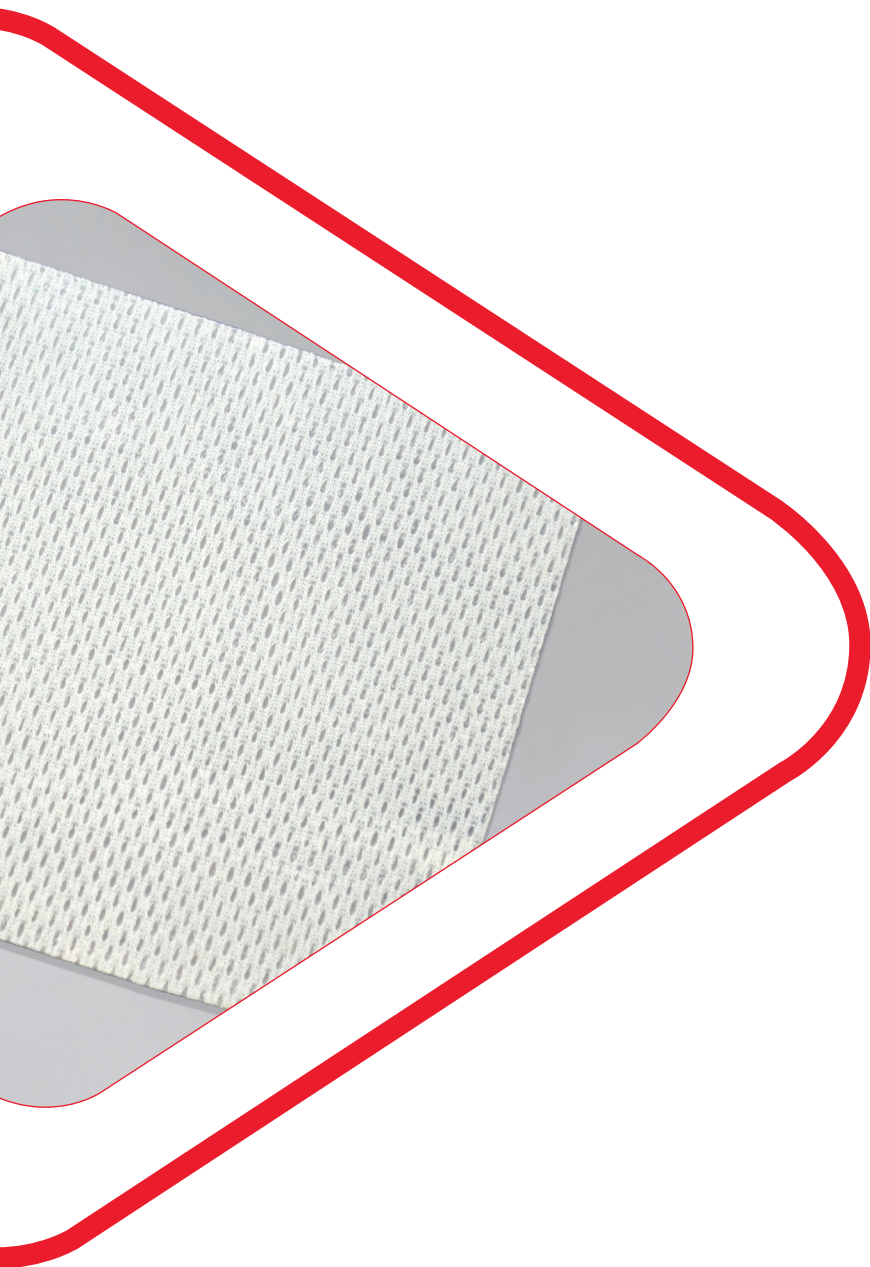


B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

SILIKONSKA
MREŽICA



SILIKONSKA MREŽICA (1-stranska)

Neboleča mehka silikonska mrežica. Večja prepustnost omogoča boljši nadzor nad visoko viskoznim izločkom.

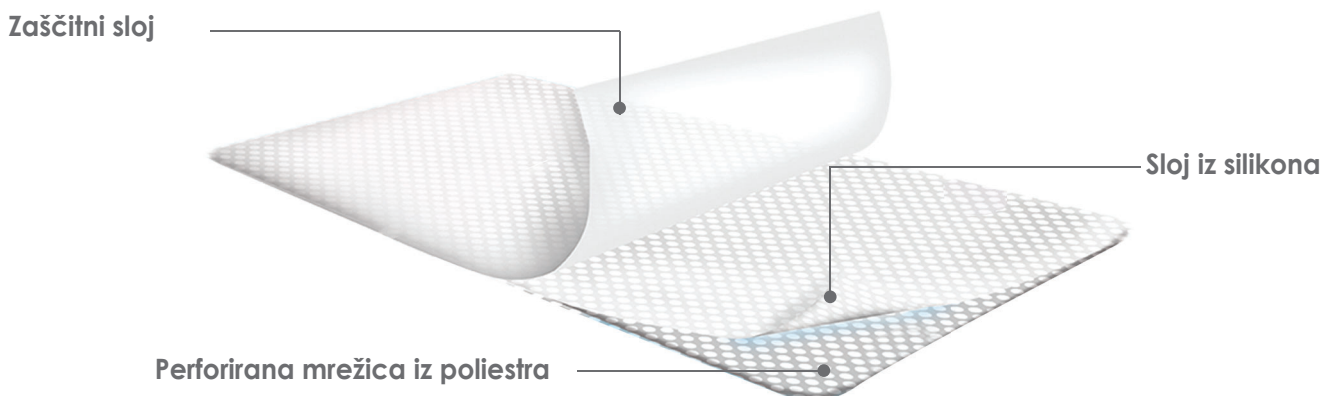

Silikonska mrežica (1-stranska) je prepustna, nesprijemljiva in mehka. Sloj iz silikona je rahlo lepljiv, kar omogoča boljšo namestitvev in zadrževanje obloge na rani. Sloj iz silikona preprečuje tudi maceracijo, saj zavira iztekanje izločka iz rane na okolno kožo tudi s strani.

Večja velikost por mrežice zagotavlja učinkovito obvladovanje visoko viskoznega izločka, medtem ko mehki silikon zagotavlja odstranitev obloge brez bolečine ali poškodbe občutljivega novonastalega tkiva.

INDIKACIJE

Zdravljenje ran, pri katerih se je treba izogibati sprijemanju obloge s tkivom. Pogosto se uporablja v kombinaciji z vpojnimi oblogami.

Uporaba pri odprti poškodbi kože ali odrgninah, kirurških izrezih, opeklinah 1. in 2. stopnje, mehurjih, raztrganinah, delnih in polnih presadkih, razjedah na nogah in razjedah zaradi pritiska, diabetičnih razjedah, poškodbah kože po radioterapiji ali steroidni terapiji.

KODE PROIZVODA

Ref. koda	Velikost (cm)	Kos/ Pak.
SL050075	5 x 7.5	10
SL075100	7.5 x 10	10
SL100180	10 x 18	10
SL150200	15 x 20	10

B-Wise partner:



Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova 9, Ljubljana
T: 01 542 51 11
E: info@zaloker-zaloker.si
W: zaloker-zaloker.si | rane.si

Be Wise!



bwisewoundcare.com



B▶WISE
WOUND CARE ALLIANCE

LIPOTUL
LIPOKOLOIDNA
MREŽICA






LIPOTUL

LIPOKOLOIDNA MREŽICA

Vlažno okolje za celjenje in neboleča odstranitev.
Večja prepustnost za učinkovito oskrbo ran z visoko viskoznim izločkom.

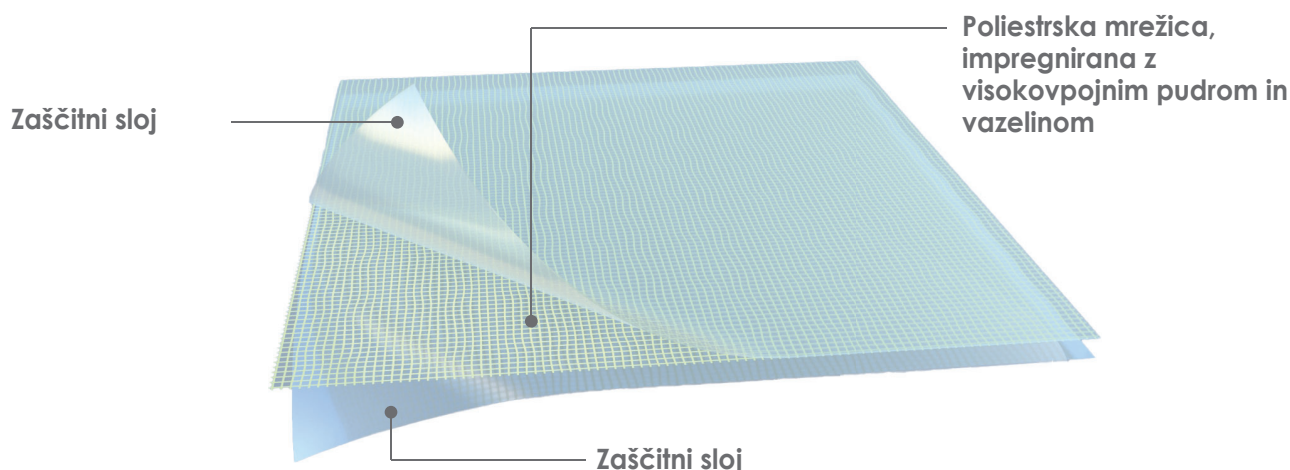

Nelepljiva obloga za rane iz poliestrske mrežice, impregnirane v mehkem, nelepljivem matriksu, ki vsebuje visokovpojni puder (CMC), mehki parafin in kohezijske polimere. Visokovpojni delci ob absorpciji izločka iz rane želirajo. To zagotavlja vlažno okolje, ki pospešuje celjenje ran. Poleg tega nelepljivi učinek nastalega gela deluje skupaj z nelepljivim učinkom lipidov (mehki parafin in parafinsko olje), da se zagotovi neboleče odstranjevanje obloge.

INDIKACIJE

Obravnava ran, kadar se je treba izogibati sprijemanju s tkivi.
Pogosto se uporablja v kombinaciji z vpojnimi oblogami.
Običajna uporaba za: raztrganine ali odrgnine kože, kirurške izreze, opekline 1. in 2. stopnje, stanja z mehurji, razjede zaradi pritiska, diabetične razjede na stopalu.

KODE PROIZVODA

Ref. kode	Velikost (cm)	Kos / Pak.
LT050050	5 x 5	10
LT100100	10 x 10	10
LT100200	10 x 20	10
LT150150	15 x 15	10

B-Wise partner:



Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova 9, Ljubljana
T: 01 542 51 11
E: info@zaloker-zaloker.si
W: zaloker-zaloker.si | rane.si

Be Wise!



bwisewoundcare.com